



**SCINTILLA®
CARE**

KOMFORT-PFLEGE BETTEN

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-2669350 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de

www.funke-medical.de
-Germany-



PFLEGE BETTEN

**SCINTILLA[®]
CARE**

Suchen Sie nach einem Pflegebett, das sowohl Stabilität als auch eine Vielzahl von Funktionen bietet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Unsere Pflegebetten sind die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Mit einer robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien bieten unsere Pflegebetten eine außergewöhnliche Stabilität und Sicherheit. Darüber hinaus verfügen unsere Pflegebetten über eine Vielzahl von Funktionen, die den Komfort und die Pflege erleichtern.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten!

info@funke-medical.de

Hohe Sicherheit...
...unbegrenzter Komfort



Eigenschaften, die überzeugen



Modern und außergewöhnlich stabil:

Unsere Pflegebetten sind in den Versionen **Scintilla 1000** und **Scintilla 2000** lieferbar. Beide Modelle zeichnen sich durch ihre enorme Stabilität aus, die sogar in der höchsten Einstellung gewährt bleibt.

Sicherheit und Schutz:

Beide Modelle können mit durchgängigen oder teilbaren Seitengittern ausgestattet werden. Die durchgängigen Seitengitter können mit geringem Aufwand in die höchste Position gebracht werden. Die geteilte Variante verfügt über einen Zwischenstopp, welcher als Aufstieghilfe oder als Orientierung für den Patienten genutzt werden kann. Die Seitengitter sind in drei Varianten erhältlich:



Durchgehendes Seitengitter



Geteiltes Seitengitter: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$



Geteiltes Seitengitter: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$



Unvergleichbar solide...

Scintilla 1000

Komfort:

Durch die sehr stabile Scherenkonstruktion kann die Höhe des Pflegebetts angepasst werden. Selbst in der höchsten Position gewährt das Pflegebett Stabilität. Mit der Fernbedienung kann das Pflegebett ganz einfach in jede beliebige Position gebracht werden. Das **Scintilla 1000** unterstützt beim Aufstehen und erleichtert den Transfer. Um noch mehr Komfort zu bieten, ist die Liegefläche optional auch mit einem ergonomiefördernden Tellersystem erhältlich.

Arbeitsergonomie:

Das Pflegebett **Scintilla 1000** ist ein sicheres und stabiles Bett, welches sich bequem auf die richtige Arbeitshöhe einstellen lässt. Die Fernbedienung kann mit einem Schlüssel gesperrt werden. Die Rückenlehne verfügt über einen virtuellen Drehpunkt, der Scherkräfte auf das Steißbein verhindert. Alle zusätzlichen Optionen können auf Wunsch am Pflegebett angebracht werden. Alle Modelle der Funke Medical Pflegebetten sind außerdem zweifach gebremst. So lässt sich ein Bett, das schief im Raum steht, leicht verschieben.

Wirtschaftlichkeit:

Das **Scintilla 1000** wird aus hochwertigem Material gefertigt und garantiert eine hohe Lebensdauer. Die Verstellmöglichkeiten des **Scintilla 1000** zielen darauf ab, die Selbstständigkeit des Bewohners zu erhöhen. Das Pflegebett kann an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden. Das **Scintilla 1000** erfüllt die europäischen gesetzlichen Regelungen und ist CE-zertifiziert gem. MDR 2017/745. Darüber hinaus sind die Pflegebetten TÜV geprüft. Das **Scintilla 1000** besitzt neben Sicherheit und Stabilität ein Design, welches sich harmonisch in den Raum einfügt.



Scintilla 1000 - Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	Scintilla 1000
Abmessungen Außenmaße Untergestell	90 x 200 cm
Abmessung Außenmaße	103 x 207 cm
Abmessung Liegefläche	90 x 200 cm
Liegeflächenverlängerung	10 cm am Kopfende
Optionale Liegeflächenverlängerung	10 cm am Fußende
Höhenverstellbarkeit	38 - 80 cm
Zwischenstopp	Nicht vorhanden
Rückenteilverstellung	70°
Oberschenkelteilverstellung	30°
Unterschenkelteilverstellung	22°
Trendelenburg	Nicht vorhanden
Anti-Trendelenburg	Nicht vorhanden
Bremsen	Standard: Achsenbrems-system (2 by 2) Optional: Zentralbrems-system (4 Rollen)
Max. Belastung	225 kg
Max. Patientengewicht	175 kg
Nettogewicht des Bettes	115 kg
Optional durchgängige Seitengitter	Ja
Optional teilbare Seitengitter	Ja
Geeignet für Personenlifte	Ja
Optional Rollenverkleidung	Nein
Möglichkeit, zusätzliche Optionen einzubauen	Ja
Elektrischer Anschluss	100 - 230 V AC

Funktion... ...trifft Design

Piemont Mokka

Country Oak

Beech

Maße:

Das **Scintilla 1000** ist standardmäßig in der Größe 90/200 cm erhältlich.

Bettverlängerung:

Das **Scintilla 1000** ist standardmäßig 2 Meter lang und kann sowohl am Kopfende als auch am Fußende um 10 cm verlängert werden. Das geteilte Seitengitter kann mit einem Zwischenstück verlängert werden.

Das Pflegebett **Scintilla 1000** ist in drei Holzönen lieferbar.

Ihre Pflege...
...ist unser Auftrag



Scintilla 2000 - perfekte Symbiose aus Funktion und Design



Komfort:

Das **Scintilla 2000** wird mit Hilfe einer sehr stabilen Y-Scherenkonstruktion verstellt. Durch eine technische Raffinesse lässt sich das Pflegebett in einen luxuriösen Sessel verwandeln. In dieser Komforteinstellung können Patienten zum Beispiel in aufrechter Position frühstücken oder fernsehen. Außerdem bietet Ihnen das Pflegebett eine niedrige Einstiegshöhe von nur 25 cm und die luxuriöse Abdeckung der Räder sorgt für eleganten Flair.

Arbeitsergonomie:

Mit seinem Benutzerkomfort und den vielen Funktionsmöglichkeiten erleichtert das **Scintilla 2000** die Pflege. Bei diesem Pflegebett wurde ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Patienten gelegt. Das **Scintilla 2000** lässt sich zweifach bremsen. Zudem kann dieses Pflegebett mit einer 10-Tasten-Fernbedienung ausgestattet werden, die es ermöglicht, die Anti-Trendelenburg-Funktion sowie die Trendelenburg-Funktion über eine Taste einzustellen. Natürlich sind auch bei diesem Pflegebett zusätzliche Optionen möglich.

Wirtschaftlichkeit:

Die hochwertigen Materialien des **Scintilla 2000** garantieren eine lange Lebensdauer. Durch eine Vielzahl von Zusatzoptionen, den niedrigen Einstieg und die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten kann eine größere Gruppe an Patienten versorgt werden. Das **Scintilla 2000** erfüllt die europäischen gesetzlichen Regelungen und ist CE-zertifiziert gem. MDR 2017/745. Darüber hinaus sind die Pflegebetten TÜV geprüft. Das **Scintilla 2000** besitzt neben Sicherheit und Stabilität ein Design, welches sich harmonisch in den Raum einfügt.

Scintilla 2000 - Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	Scintilla 2000
Abmessungen Außenmaße Untergestell	90 x 200 cm, XL: 110 x 200 cm
Abmessung Außenmaße	103 x 207 cm
Abmessung Liegefläche	90 x 200 cm
Liegeflächenverlängerung	10 cm am Kopfende
Optionale Liegeflächenverlängerung	10 cm am Fußende
Höhenverstellbarkeit	25 - 80 cm
Zwischenstopp	Standard
Rückenteilverstellung	70°
Oberschenkelteilverstellung	30°
Unterschenkelteilverstellung	22°
Trendelenburg	14° gesperrt
Anti-Trendelenburg	14°
Bremsen	Standard: Achsenbrems-system (2 by 2) Optional: Zentralbrems-system (4 Rollen)
Max. Belastung	225 kg (XL: 325 kg)
Max. Patientengewicht	175 kg (XL: 290 kg)
Nettogewicht des Bettes	125 kg
Optional durchgängige Seitengitter	
Optional teilbare Seitengitter	Ja
Geeignet für Personenlifte	Ja
Optional Rollenverkleidung	Ja
Möglichkeit, zusätzliche Optionen einzubauen	Ja
Elektrischer Anschluss	100 - 230 V AC

Unverkennbar...
...vielseitig



Piemont Mokka

Country Oak

Beech

Maße:

Das **Scintilla 2000** ist standardmäßig in der Größe 90/200 cm erhältlich. Neben dieser Größe ist das Bett auch in der XL-Variante 110/200 cm erhältlich.

Bettverlängerung:

Das **Scintilla 2000** ist standardmäßig 2 Meter lang und kann sowohl am Kopfende als auch am Fußende um 10 cm verlängert werden. Das geteilte Seitengitter kann mit einem Zwischenstück verlängert werden.

Das Pflegebett **Scintilla 2000** ist in drei Holzönen lieferbar.

Zubehör



Nachttischlampe



Automatisch/
Manuell einziehbarer
Aufrichter



Komfortliegeflächen
mit Tellersystem



Aufstehbügel



Unterbettbeleuchtung

Weitere Optionen:

- Akku
- Wandabstandshalter
- Infusionsständer



Möbel



Piemont Mokka

Country Oak

Beech

Um das Interieur zu vervollständigen, können aus drei verschiedenen Holzönen die dazu passenden Nachttische und Kleiderschränke ausgewählt werden.

Nachttisch 1:

- Abmessung 48 x 48 x 74 cm (B x T x H)
- 4 Räder



Nachttisch 2:

- Abmessung 53 x 46 x 87 cm (B x T x H)
- Hydraulisch kippbares Plateau
- An zwei Seiten verwendbar
- 4 Räder



Kleiderschrank

- Abmessung 100 x 200 x 60 cm (B x T x H)
- Safe für Wertgegenstände
- Abschließbar



Konfigurieren Sie Ihr Bettnach Ihren Wünschen

Step 1: Wählen Sie die Art des Bettes.

Scintilla 1000



X-Scherenkonstruktion

Größe: 90 x 200 cm
Höhenverstellbarkeit: 38 - 80 cm

Scintilla 2000



Y-Scherenkonstruktion

Größe: 90 x 200 cm, XL: 110 x 200
Höhenverstellbarkeit: 25 - 80 cm

Step 2: Wählen Sie die Farbe.

Piemont
Mokka

Country
Oak

Beech

Step 3 + 4: Wählen Sie das Kopf- und Fußteil.

Scintilla 1000/2000/XL




Gerade Variante

Scintilla 1000/2000



Bogen-Variante

Step 5 + 6: Wählen Sie das Seitengitter.

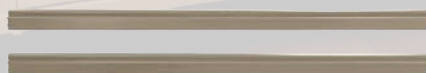

Durchgehendes
Seitengitter



Geteiltes Seitengitter: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$



Geteiltes Seitengitter: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$

Step 7: Wählen Sie die Art der Fernbedienung.

Pflegebett	Anzahl Funktions-tasten	Komfortein-stellungen	Anti-Tren-delenburg-Lagerung	Trendelen-burg-Lage-rung
Scintilla 1000	8	✓		
Scintilla 2000	9	✓	✓	
Scintilla 2000	10	✓	✓	✓

Step 8: Wählen Sie den Rollentyp.



Rollen (100 mm)



Rollen (75 mm)



Rollen (75 mm)
mit Rollenverkleidung
(nur lieferbar für das Scintilla 2000)

Step 9: Wählen Sie das Bremssystem.

Standard: Achsenbremssystem (2 by 2)
Optional: Zentralbremssystem (4 Rollen)

Zubehör



Nachttischlampe



Automatisch/
Manuell einziehbarer
Aufrichter



Komfortliegeflächen
mit Tellersystem



Aufstehbügel



Unterbettbeleuchtung

Weitere Optionen:
• Akku
• Wandabstands-
halter
• Infusionsständer

Möbel

Nachttische



Kleiderschränke





Funke Medical



Distributed by/Vertrieb durch:

Funke Medical GmbH
Ährenfeld 10
46348 Raesfeld
Tel.: +49-2865-266 93 50
Fax: +49-2865-8133
info@funke-medical.de
www.funke-medical.de



Safety
Quality
Functionality



www.tuv.com
ID 0000000888



LimaBeds B.V.
Willem Alexanderstraat 6A
6691 EE Gendt
Nederland
www.limabeds.nl
+31-(0)481 420 186